

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar info@aximo.nl

Wij verlenen 1 jaar garantie op de ultrasonische elektrische tandenborstel. Je dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie binnen de periode van één jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Neem altijd eerst contact met ons op en stuur het product niet eerst retour.

Let op: de garantie geldt niet; bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Voor het juist gebruik dien je de instructies in deze handleiding op te volgen.

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team
info@aximo.nl

AXIMO

AXIMO® is een geregistreerd handelsmerk.
Alle gepubliceerde teksten en foto's zijn uitsluitend voor AXIMO gemaakt.
Daarbij wordt het gebruik beschermd door internationale auteursrechtwetgeving.
2024 AXIMO®

AXIMO

GEBRUIKSAANWIJZING

Ultrasonisch elektrische tandenborstel



Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor de ultrasonische elektrische tandenborstel van AXIMO. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn, neem dan contact met ons op via email: info@aximo.nl

Vorbereiding voor gebruik

Monteren van de opzetborstel:

Lijn de opzetborstels zo uit dat de richting van de borstelharen dezelfde is als de voorkant van de handgreep van de tandenborstel. Druk de borstelkop stevig naar beneden tegen de metalen as totdat deze niet meer naar beneden kan.



De tandenborstel opladen

- Steek de oplader in een USB stopcontact.
- Zorg ervoor dat de handgreep en de oplader tijdens het opladen loodrecht staan, anders zal de handgreep vallen en schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.
- Plaats de handgreep op de oplader en het indicatielampje zal knipperen.
- Als het oplaadindicatielampje blijft branden is het volledig opgeladen.
- De handgreep is vooraf opgeladen, je hoeft hem dus niet volledig op te laden voordat je hem voor de eerste keer gebruikt.

Batterijduur

LANGDURIGE KRACHT

Volledig opgeladen in 10 uur, 4 tot 8 weken gebruik.

- Het wordt aanbevolen om een nieuwe opzetborstel te vervangen bij gebruik van 3 maanden.
- Dit product is alleen ontworpen om je tanden, tandvlees en tong te reinigen.
- Stop met het gebruik van dit product en neem contact op met een (tand)arts als ongemak of pijn optreedt.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

Beschadigingen

- Controleer zowel snoer als aansluiting regelmatig op tekenen van schade of slijtage. Staak het gebruik als dit product op enigerlei wijze beschadigd lijkt (opzetborstel, handvat, oplader).
- Dit product bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden.
- Gebruik de oplader nooit als het snoer/de stekker beschadigd is.
- Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
- Om gevaar te voorkomen, moet je altijd het originele model oplader gebruiken om op te laden.
- De oplader van dit product kan geen elektrische tandenborstels van andere merken of producten met inductieve/draadloze oplaadfunctie opladen.
- Vermijd - indien mogelijk - langer opladen dan 12 uur.

Recyclen

Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Gooi de oplaadbare batterij niet weg samen met het gewone huisvuil.

Geef ze in plaats daarvan af bij het aangewezen recyclingstationcentrum.

Het op de juiste manier weggooien van producten helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.


Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Waarschuwingen met betrekking tot gebruik

- Om elektrische schokken en brand te voorkomen, laad het product niet op in de badkamer.
- Dompel het niet in water of andere vloeistoffen en was de oplaadpoort niet met water.
- Plaats of bewaar hem niet boven of in de buurt van een badkuip, wastafel, zwembad enz.
- Zorg ervoor dat de oplader na het reinigen volledig droog is voordat je deze op de voeding aansluit.
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd is of als het USB stopcontact niet goed vastzit.
- Plaats het product niet in heet water.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gebruikt op een elektrische stroombron die overeenkomt met de nominale spanning. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Houd bij het loskoppelen altijd de aansluiting vast in plaats van het snoer.
- Haal de elektrische tandenborstel niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Niet demonteren of repareren. Dit kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring of kennis over het apparaat hebben, of de instructies niet kunnen lezen. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Raadpleeg voor gebruik je (tand)arts als je erge tandaandoeningen hebt of orale chirurgie hebt gehad.
- Raadpleeg je tandarts als je tandvlees of mond na gebruik van de elektrische tandenborstel erg gaat bloeden of als dit bloeden langer dan een week door blijft gaan wanneer je de tandenborstel blijft gebruiken.

Borstelstand

Om een keuze te selecteren, druk je gewoon op de aan/uit knop totdat de gewenste standenindicator oplicht. Eenmaal verlicht, wordt die keuze de standaardstand totdat een andere stand wordt geselecteerd. Elke stand is ontworpen om twee minuten te werken, met korte pauzes na 30 seconden.

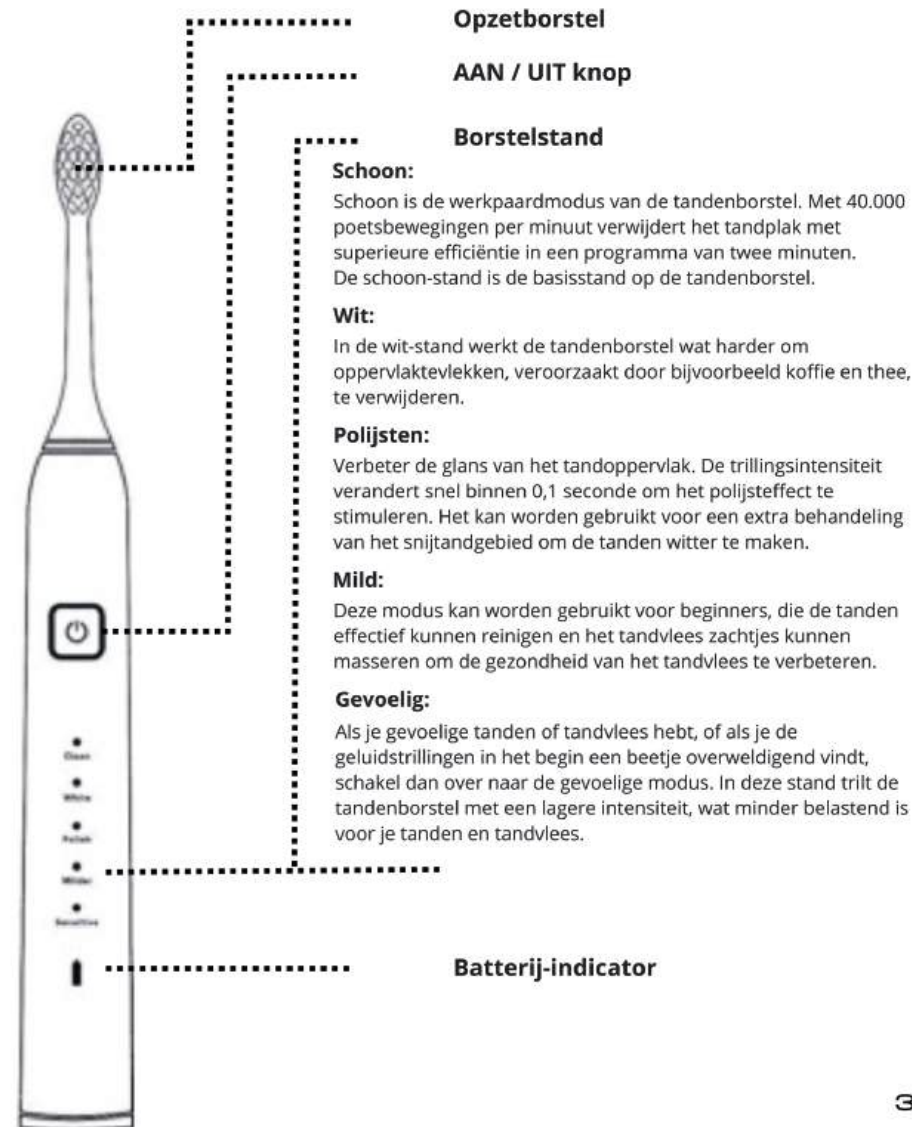

Gebruiksaanwijzing


1. Steek de opzetborstel voorzichtig in de oscillerende as en laat een kleine opening tussen de opzetborstel en de handgreep.
2. Om spatten van tandpasta te voorkomen, breng je vóór gebruik een beetje tandpasta op de opzetborstel aan.
3. Week eerst de opzetborstel en plaats deze in de mond, start dan de tandenborstel.
4. Beweeg de tandenborstel langzaam met de borstelharen in een hoek van 45° richting de tandvleesrand.
5. Houd de handgreep voorzichtig vast en beweeg langzaam in cirkelvormige bewegingen. Druk niet te hard op je tandvlees.
6. Spoel je mond na het poetsen met water.

Dit product kan veilig worden gebruikt met/voor: Beugels (de opzetborstel zal sneller slijten), vullingen, kronen, porseleinen tanden etc.

Intelligent poetsen

Tandartsen adviseren een poetstijd van 2 minuten en stimuleren het poetsen van elk kwadrant van de mond gedurende 30 seconden.

De interval van 30 seconden helpt ervoor te zorgen dat je elke 30 seconden naar een ander deel van je gebit kunt switchen. Na twee minuten stopt de tandenborstel vanzelf.

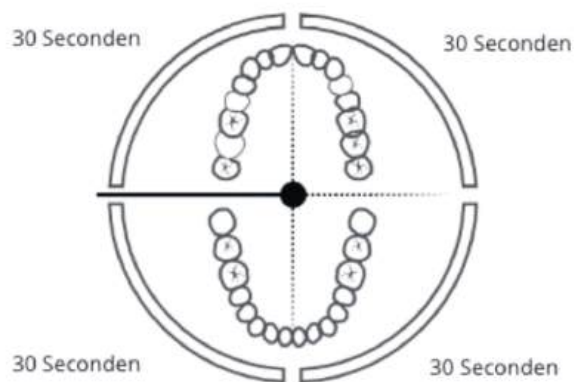

Na het poetsen

1. Verwijder de opzetborstel en was de metalen as met warm water. Zorg ervoor dat je alle resterende tandpasta verwijdert.
2. Let op: druk geen scherpe voorwerpen op de rubberen afdichtring op de metalen as, anders kan dit schade veroorzaken.
3. Veeg het gehele oppervlak van de handgreep af met een natte doek.
4. Let op: gebruik geen ontsmettingsalcohol, azijn of bleekmiddel om het handvat schoon te maken, dit kan verkleuring veroorzaken.

Reiniging

Reinig de opzetborstel:

Was de opzetborstel en borstelharen na elk gebruik en laat het drogen. Trek niet aan de borstelharen, omdat ze hierdoor vervormen en eraf vallen.

Reinig de handgreep:

Reinig het handgreepoppervlak met schoon water, poets het met een zachte doek en laat het drogen. Druk geen scherpe voorwerpen op de rubberen afdichtring op de metalen as, anders kan er schade ontstaan.

Reinig de oplader:

Maak vlekken op de oplader schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat je de stekker uit het USB stopcontact haalt voordat je de oplader reinigt. Veeg het oppervlak van de oplader af met een natte doek en gebruik deze nadat deze volledig droog is.

Reinig de onderkant van de opzetborstel:

Zorg ervoor dat je vóór het opladen de onderkant van de borstelhandgreep schoonmaakt, veeg de onderkant af met een natte doek en laad hem vervolgens op na het reinigen.

Vervang de opzetborstel

Professionele tandartsen adviseren om de opzetborstel elke 2-3 maanden te vervangen voor de beste resultaten.

Bewaren

Als je dit product langere tijd niet gebruikt, laad dan de tandenborstel volledig op, haal de oplader uit het USB stopcontact, maak de twee onderdelen schoon en bewaar ze op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.